

Mirage Quattro™

FULL FACE MASKE

TECHNOLOGIE DER VIERTEN GENERATION

Großer Passbereich

Die vierte Generation der ResMed Full Face Masken passt mehr als 95% aller Patienten.*

Doppelwandiges Mirage™-Maskenkissen mit Luftfedertechnologie

Einzigartiges Maskenkissen mit vielen Details, damit die Maske während des Schlafs dicht bleibt.

MicroFit-Regler

Neue Stirnstützenanpassung sorgt für patientenspezifischen Sitz und Komfort.

Leicht, leise und anwenderfreundlich

Diese Leistungsmerkmale werden durch modernes Maskendesign, verbessertes Design der Luftauslassöffnungen und eine Reihe von anwenderfreundlichen Eigenschaften optimiert.

MicroFit-Regler

Sorgt bei 95% aller Patienten* für bessere Passform und Abdichtung sowie für besseren Sitz und höheren Komfort.

Verbesserte integrierte Luftauslassöffnungen

Sorgen für ein minimales Geräuschniveau.

Maskenkissen-Clip

Erleichtert das Abnehmen des Kissens vom Maskenrahmen.

Bewegliche Kissenmembran am Kinn

Bewahrt den Sitz und gleicht Kieferbewegungen und Fallenlassen des Kinns aus.

Kopfbandschlitz

Beibehaltung optimaler Einstellungen des oberen Kopfbands.

Bewegliche Kissenmembran am Nasenrücken

Ermöglicht Patienten mit unterschiedlichen Nasenformen die Benutzung und verhindert Leckagen in die Augen.

Doppelwandiges Mirage-Maskenkissen mit Luftfedertechnologie


Verbessert den Sitz an den wichtigsten Stellen.

Kopfband-Clips

Ermöglichen das praktische Abnehmen der Maske.

Vereinfachtes Kniestück mit Sicherheitsventil

Weniger Kniestückteile für einfachen Zusammen- und Auseinanderbau; Sicherheitsventil erhöht die Sicherheit, wenn der Luftfluss in die Maske behindert wird.

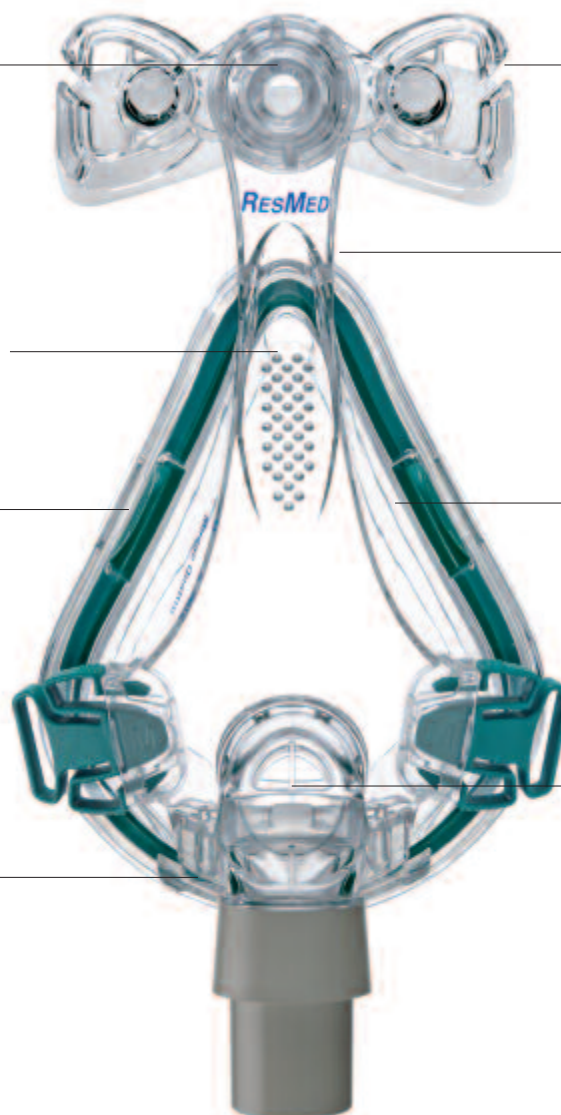



TECHNISCHES HIGHLIGHT

MicroFit-Regler

Eine Auswahl an 24 Positionen – sorgt bei 95% aller Patienten* für einen komfortablen und bewirksam wirkenden Sitz.

- **Anpassungsfähig:** Kann auf dem Gesicht des Patienten angepasst werden.
- **Präzise:** Durch drehen des Reglers wird die Stirnstütze in kleinen Schritten verstellt.
- **Schritt für Schritt:** Schmiegt sich an das Gesicht des Patienten an und gibt ihm so die Möglichkeit, den besten Sitz zu spüren.
- **In Kombination mit dem Maskenkissen:** Während mit dem Regler der Winkel zum Gesicht geändert wird, passt sich das Maskenkissen den Gesichtskonturen an – ganz ohne strammes Anziehen des Kopfbandes.

VORTEILE FÜR DEN PATIENTEN

Individueller Komfort

- MicroFit-Regler ermöglicht die genaue Anpassung an das Gesicht.
- Doppelwandiges Maskenkissen mit Luftfedertechnologie passt sich den Gesichtskonturen genau an und erlaubt Bewegungen im Schlaf.

Leicht und leise

- Modernes Design, das sich leicht auf dem Gesicht anfühlt.
- Verbessertes Design der Luftauslassöffnung reduziert das Geräuschniveau.

Anwenderfreundlich

- MicroFit-Regler und Luftfedertechnologie sorgen für einen guten Sitz – beim ersten Mal und jedes Mal danach.
- Weniger Bestandteile sorgen für einfache Handhabung und problemlosen Zusammen- und Auseinanderbau.

VORTEILE FÜR DAS FACHPERSONAL

Passbereich auf 95% aller Patienten* angestiegen

- MicroFit-Regler und Luftfedertechnologie ermöglichen Maskenanpassung an mehr Patienten.
- Neue XS Maskengröße.

Kundenzufriedenheit und Compliance

- Umfassende Informationen für den Patienten – mit Tasche, DVD zur Maskenpflege, Kurzanleitung zur Anpassung und Gebrauchsanweisung.
- Höhere Therapieakzeptanz durch sicheren Sitz beim ersten Anpassen.
- Individuelle Passform, Komfort und Abdichtung fördern die langfristige Compliance.
- Vereinfachte Teile ermöglichen schnellen und einfachen Zusammen- und Auseinanderbau.

Kosten- und Zeiteinsparungen

- Weniger Inventar: 33% weniger Artikelnummern als die Ultra Mirage™ Full Face Maske sowie weniger Maskenteile.
- Kürzere Anpassungs- und Schulungszeit: Verbesserte Maskenkissentechnologie sorgt für schnellen, sicheren Sitz.
- Weniger Rückfragen: Einfache Anwendung und Anpassung.

ARTIKELNUMMERN

Mirage Quattro Full Face Maske

X-Small	61204
Small	61205
Medium	61206
Large	61207

* Quelle: Interne, anthropometrische ResMed-Daten